

Miss Arrivo[®] THE VEGAS II

筋肉の運動性が大幅にUP
新モード「HI-MFIPモード」による電気パルスが運動性を大幅に増加し、より高い効果が期待できるようになりました!

「5分間^{*1}」の威力。
HI-MFIPモードを搭載したコンパクトモデル

HI-MFIP [ハイ-エムエフアイピー]

特許取得 特許 第5872741号


MFIP[®] ^{*2} [エムエフアイピー]

美容成分を届ける

MFIP[®]とは中周波断続パルスのことをいいます。
MFIP[®]は4極の素子のうち、2極の素子が1群2群にわけられ断続的に電気パルスを流します。

ULTRAPULSE[®] [ウルトラパルス]

特殊な痛みのない電気パルスを与える事により、お肌に塗布した美容成分を補給し、お肌のコンディションを整え健やかに保ちます。

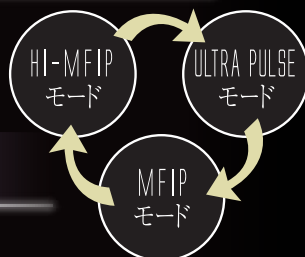

3秒ごとにモードが切替わります

光のトリートメント

RED LED [2連赤色LED]

620nmという光の波長を2連搭載。2つのトリートメントで、元気な肌作りをサポートします。



肌を引き締める

EMS

4極の素子間に微弱な交流電流が繰り返し流れ、マイクロウェーブを起こします。その優しいウェーブが表情筋に働きかけます。

肌をあたためる

中・高周波

お肌をじんわりと温めます。
お肌に負担のかからないよう、やさしい90kHzの中高周波を採用しております。

コードレス充電式タイプ

パソコン等で簡単に充電が可能。
充電式なので場所を問わずご使用頂けます。(充電には付属のUSBケーブルをご使用ください)



チタンコーティング

デリケートな肌に触れる電極部分はチタンでコーティング。



ザ ベガスII ミスアリーヴォ ご使用方法

- 1 耳下腺をくぐるくるとほくし鎖骨まで流す。
- 2 6秒ずつ矢印の順番に当てていきます。
- 3 螺旋を描きながら動かしていきます。(各1回)
- 4 直線を描くように、動かしていきます。(各3回)
- 5 矢印の方向へ、下から上へと動かします。(各3回)
- 6 首→フェイスライン→こめかみの順に動かします。(各1回)
※のどぼとけは避けて下さい。

※トリートメント中はお肌が美容液(PE ザ ベガス)で必ず濡れている状態で行って下さい。トリートメント中に乾いた場合は付け足しながら行ってください。